


Procedura passo per passo



Etichettare il tubicino di prelievo:
[N] Nome e cognome
[A] Data di nascita
[D] Data del prelievo




Posizionare un raccoglitore per feci oppure alcuni strati di carta igienica sul WC.

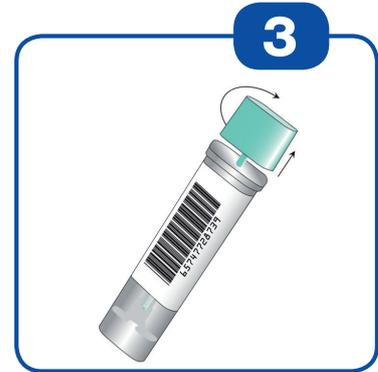


Svitare il tappo del tubicino di prelievo ed estrarre il cappuccio turchese incluso lo stick.



Conficcare la punta dello stick in diversi punti del campione di feci.

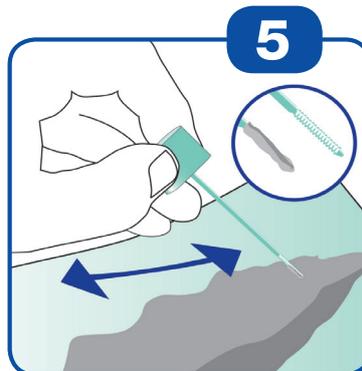


Non riempire eccessivamente lo stick. Le feci devono essere accumulate solo nelle scanalature della punta. E' sufficiente una quantità minima del campione.

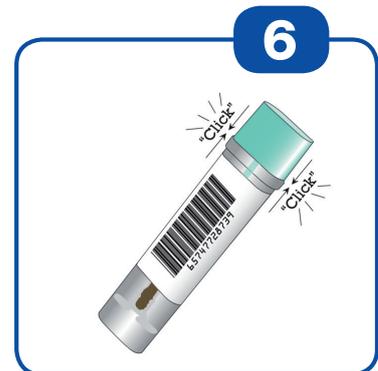

Inserire lo stick di prelievo **solo una volta** nel tubicino e chiuderlo con un "click" percettibile. **Non ripetere il prelievo!**



Agitare bene il tubicino, inserirlo nella busta verde e consegnarlo possibilmente il giorno del prelievo o il giorno successivo **al proprio medico** (ente emittente).

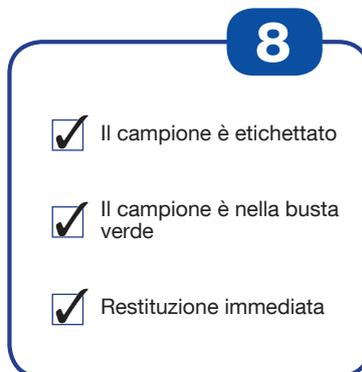

Controllare!

V. 2017-08-02 (it)

Distribuito da / distributed by:

Mast Diagnostica GmbH

Feldstraße 20

DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0

Fax +49 (0)4533 2007 68

fit@mast-diagnostica.de

www.fit-screening.de



**Mast
Group**

Produttore:



EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Giappone